


TAG 3.0

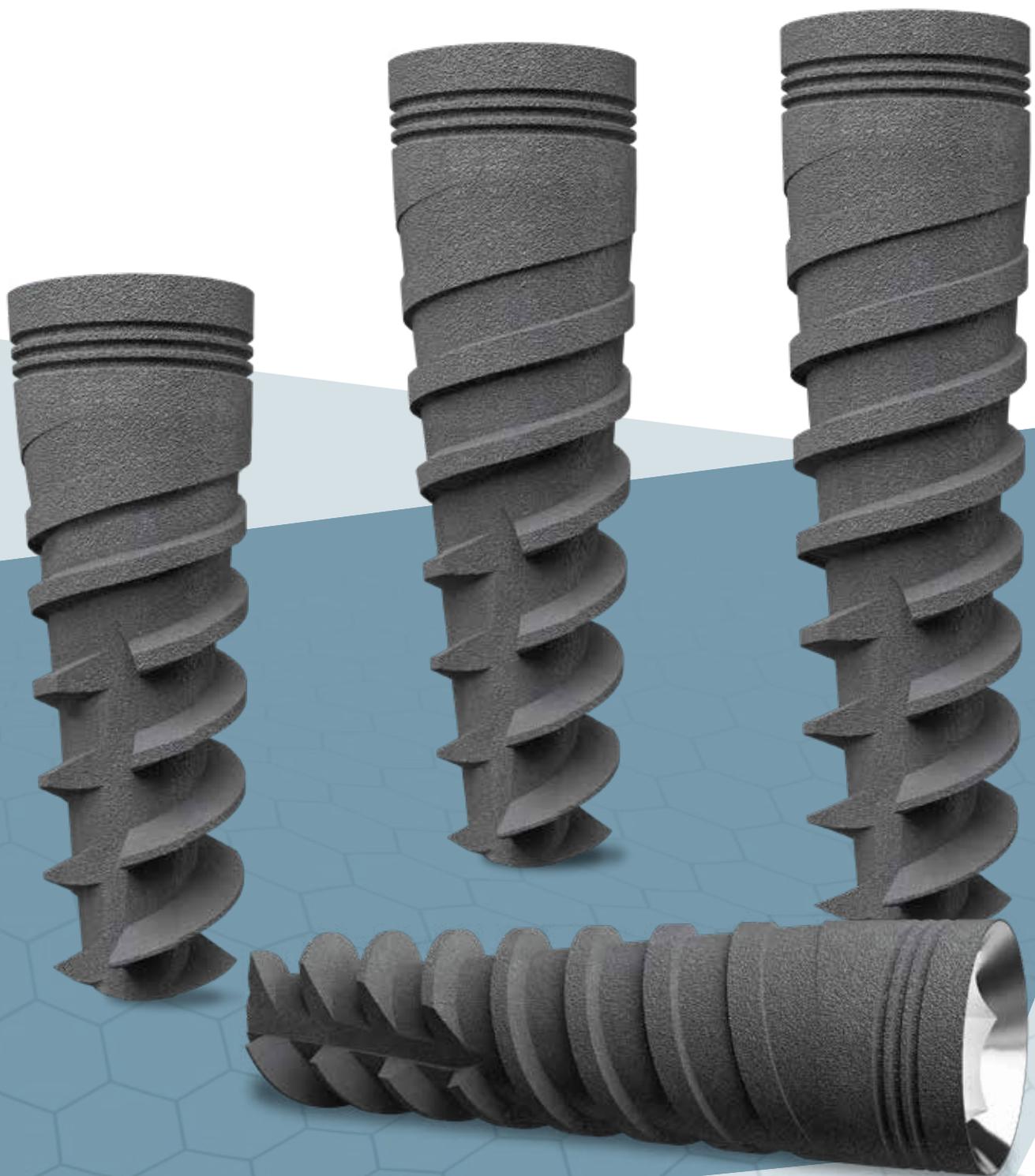

TAG 3.0

- Impianto conico automaschiante
- Connessione interna esagonale

TITANIUM GRADO 5


TAG 3.0 nasce dall'esigenza di risolvere casi clinici con creste frontali atrofiche e sottili ed inoltre come valida soluzione nelle agenzie dei laterali.

Il design dell'impianto è caratterizzato da un corpo conico condensante ad effetto osteotomo e da un colletto ideato per ridurre i traumi della zona crestale.

La vite di connessione da 1,6 mm con ingaggio profondo, favorisce il perfetto accoppiamento della parte protesica.

Il trattamento superficiale "Sandblasting and acid-etching" consente di ottenere una mappatura microrugosa che favorisce ed accelera il processo di osteointegrazione.


Una eccellente decontaminazione viene realizzata utilizzando un reattore al plasma di argon in camera bianca.

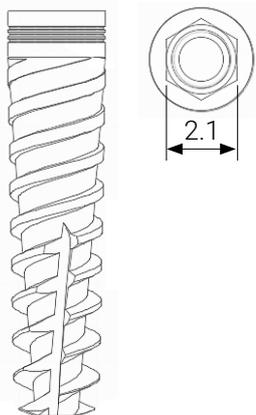	10 mm	11.5 mm	13 mm
			
Codici TAG 3.0	TAG MF IMPIANTO 3.0 H10 cod. TAGMF029	TAG MF IMPIANTO 3.0 H11.5 cod. TAGMF030	TAG MF IMPIANTO 3.0 H13 cod. TAGMF031

Impianto Ø3.0



Impianto Ø3.5

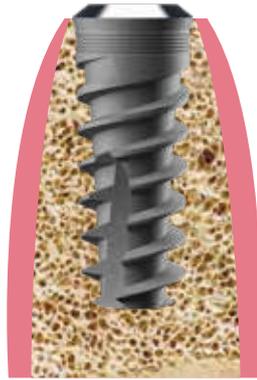

Creste sottili



Spazi ridotti

TAG 3.0 Componentistica protesica

	Vite di guarigione		Transfer open tray		Analogo da gesso
	H.2 - cod. TAGVG32 H.4 - cod. TAGVG34		cod. TAGTRA3		cod. TAGANA3
	Cilindro calcinabile N/R e Rot.		Moncone tras mucoso		Cilindro provvisorio in titanio N/R e Rot.
	cod. TAGCC3 cod. TAGCC3R		H.0 - cod. TAGMD3 H.2 - cod. TAGMD32		cod. TAGMP3 cod. TAGMP3R
	Moncone inclinato 15°		Moncone inclinato 25°		Vite monconale M1,6
	cod. TAGMA315		cod. TAGMA325		cod. TAGVM3
	Moncone a pallina		Cappetta bassa aperta		Cappetta in Teflon cod. TAGCAPT
	H.1 - cod. TAGASF31 H.2 - cod. TAGASF32 H.3 - cod. TAGASF33 H.4 - cod. TAGASF34		cod. TAGCAP		

meté
Biomedical

Via Boccaccio, 8
21010 Arsago Seprio (VA)
Tel./Fax: +39 0331.796417
www.dentalmete.it